

省スペース

Technology You Can Trust

**AND**  
A&D Medical

# バリアフリースケール

手すり付 AD-6107R ¥190,000(税抜)

取引・証明用  
検定付

精度等級  
3級

低い計量台で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に測定  
スタイリッシュ体重計




● つかまりやすい  
大型ハンドル

● バッテリー駆動  
200時間以上

● 軽量コンパクト

従来品より10kg軽量化いたしました。

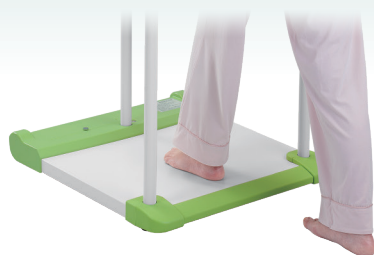

● 安全設定

計量台高さ48mm低く乗りやすい計量台、  
乗り位置を見やすくカラー識別、  
さらに角をまるく安全に配慮しました。



● 移動がラクな大型キャスター

必要な場所へらくらく移動、ロングライフバッテリー  
駆動ですぐ測定できます。

使いやすい  
多機能表示器



- ✓ 表示器は分かりやすい日本語表示
- ✓ BMI計算機能 (デジタル身長計の接続により自動計算可能)
- ✓ 衣服引き(風袋引き)機能
- ✓ 外部機器との連携 (接続機器はお問い合わせください。)

仕様

型名	AD-6107R
販売名	バリアフリースケール(手すり付き)
精度等級	3級
ひょう量	200kg
目量	100g(150kg未満)/200g(150kg以上)
最小測定量	2kg
最大減算風袋量	90kg以下
使用温湿度範囲	温度: +5°C~+35°C 湿度: 85%RH以下
保存温度範囲	温度: -10°C~+60°C
表示	7セグメント液晶表示 メイン画面: 文字高 23mm
電源	ACアダプタ: AC100V、50-60Hz AX-TB266 もしくは、AS-BLS-120W(プリンタAD-PR580使用時) または、単一形アルカリ乾電池4本
電池寿命	連続動作(アルカリ乾電池使用時)200時間以上
外部出力	RS232C(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
外形寸法	613(W)×653(D)×870(H)mm
計量台寸法	493(W)×426(D)×48(H)mm
本体質量	約17kg(乾電池、ACアダプタ含まず)
付属品	専用ACアダプタ(AX-TB266)、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
梱包サイズ・重量	690(W)×664(D)×928(H)mm 約22kg 段ボール梱包
承認番号	第D177号
商品コード	AD6107R
JANコード	4981046154925
標準価格(税抜)	¥190,000

オプション



**ACアダプタ**  
AX-TB266  
¥4,500 (税抜)  
JANコード: 4981046618076  
※ADプリンタユニットを未装着時のACアダプタです。



**ADプリンタユニット**  
AD-PR580  
¥55,000 (税抜)  
JANコード: 4981046713603  
※プリンタの取付には、別途プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要です。

NO IMAGE



**プリンタ取付キット**  
AD-PR580-007  
¥10,000 (税抜)  
JANコード: 4981046156004



**AD-PR580用ACアダプタ**  
※AD-PR580付属品  
AS-BLS-120W  
¥15,000 (税抜)  
JANコード: 4981046713689



**AX-BLS-120W用ACコード**  
※AD-PR580付属品  
AS-ACS-120A  
¥2,700 (税抜)  
JANコード: 4981046713696



**プリンタ用紙 (5巻/箱)**  
AX-PP147-S  
¥5,000 (税抜)  
JANコード: 4981046711340

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803~9.807m/s <sup>2</sup>
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804m/s <sup>2</sup>
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796~9.801m/s <sup>2</sup>
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794~9.799m/s <sup>2</sup>
⑤	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794m/s <sup>2</sup>

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは  
エー・アンド・テイME機器相談センター

**0120-707-188**

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00



本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。  
※AD6107R-ADJC-01-PR1-17b08GP